

ELLISYS

Premier Skin Rejuvenation system

Fractional Micro Needling
Radiofrequency FMR

ELLISYS

جوانسازی مدرن، موثر و مقرون به صرفه



Power	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Display	8 Inch TFT Touch Color LCD
Dimension (mm)	290(W) × 530(L) × 1008(H)
Weight	33Kg
Mode	BLEND, COAG-1, COAG-2
Output Power	50W
RF Fluence	1 ~ 10 Level
RF Output Time (Emission)	100ms ~ 900ms (Control Unit: 100ms)
Needle Penetration Depth	0.5mm ~ 3.5mm (Control Unit: 0.1mm)
Interval Time (sec)	Manual, 0.3 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
RF Frequency	1Mhz
Needle Thickness	0.3mm
Number of Needle	25 Pin (5×5), 49 Pin (7×7), 14 Pin (2×7)
Needle Application Range	7.8 mm × 7.8 mm



CHUNGWOO



آفتاب فروزان آریا (آفا)
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

www.afateb.com | info@afateb.com | @afa.teb | ۸۸۱۰۷۰۷۰

خط ویژه


تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی
شمالی، خیابان ناهید، پلاک ۴۲، طبقه سوم



کمپانی CHUNGWOO کره جنوبی، پیشرو در تولید تجهیزات پزشکی در حیطه پوست و زیبایی، دستگاه السیس را به‌عنوان یکی از پرکاربردترین و موثرترین دستگاه‌های اراف فرکشنال به بازار عرضه کرده است.

مشخصات دستگاه السیس:

- مجهز به سه نوع تیپ جهت کاربردهای تخصصی:
- تیپ 49 بین Non Insulated
- تیپ 25 بین Insulated
- تیپ 14 بین Non Insulated
- دارای نیدل‌هایی با روکش طلا جهت رسانایی بهتر و کاهش ریسک حساسیت
- دارای قابلیت استفاده از هر تیپ (Needle) بیش از 6000 شات بدون کند شدن در طی جلسات درمانی
- تولید جریان رادیو فرکانسی با توان بسیار بالا با فرکانس 1 مگاهرتز
- قابلیت تنظیم عمق نفوذ از 0.5 تا 3.5 میلی‌متر با دقت 0.1 میلی‌متر جهت استفاده در ضخامت‌های مختلف پوست و متناسب با موضع درمان
- قابل استفاده در کلیه تیپ‌های پوستی در تمامی فصول بدون هیچگونه عوارض جانبی
- دوره نقاهت کوتاه
- درد بسیار کم و عدم ایجاد کبودی و خونریزی
- امکان استفاده در تمامی نقاط صورت حتی پلک بالا و پایین
- عدم ایجاد آسیب حرارتی در اپیدرم و توانایی ایجاد حرارت در درم پاپیلار تا رتیکولار
- عدم لیز چربی‌های صورت به‌دلیل استفاده از نیدل‌های Non Insulated
- دارای هندپیس میکرو مموری موتور برای ورود آسان‌تر سوزن‌ها به پوست و جلوگیری از آسیب، خونریزی و درد زیاد
- User Friendly: دارای برنامه‌های اتوماتیک با توجه به مناطق مختلف صورت و بدن
- دارای قابلیت انجام تنظیمات به‌صورت دستی جهت رسیدن به حداکثر اثربخشی با توجه به تنوع پوست در افراد مختلف
- RF Time Out: قابلیت تنظیم زمان انتشار جریان رادیوفرکانسی از 100 میلی‌ثانیه تا 900 میلی‌ثانیه جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی با توجه به نوع ضایعه و شرایط پوست
- Interval Time: دستگاه السیس سریع‌ترین سیستم اراف فرکشنال در دنیا بوده که دارای قابلیت تنظیم فاصله شات‌ها از 0.3 میلی‌ثانیه تا 3 ثانیه می‌باشد.

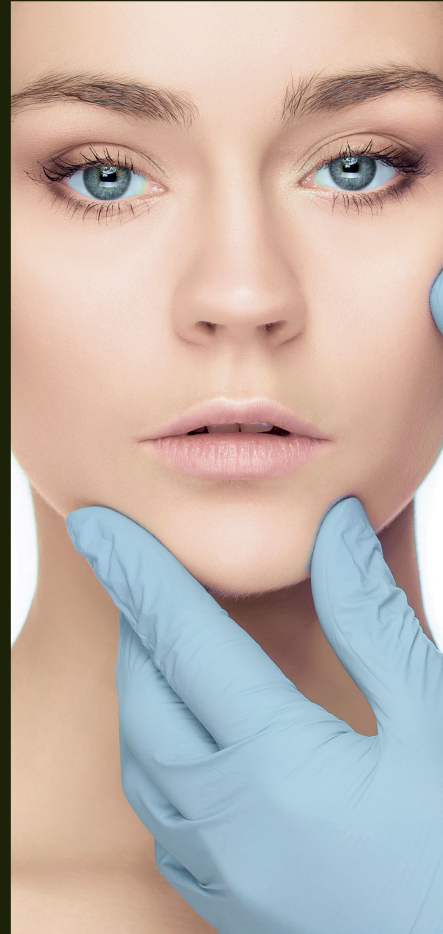

کاربردهای دستگاه السیس با توجه به تیپ‌های تخصصی:

BLEND Mode

49

-- RF Fluence

0.9 Emission

3.0 Depth

3.0 Interval Time

- تیپ با 49 نیدل:
- افزایش قوام و جوانسازی پوست
- کاهش چین و چروک صورت، گردن و بازو
- Skin Tightening
- درمان انواع اسکارهای پوستی و منافذ باز
- درمان Acne Prone Skin
- درمان تعریق بیش از حد (Hyperhidrosis)
- کنترل ترشح بیش از حد چربی پوست
- Whitening and Lightening

BLEND Mode

25

-- RF Fluence

0.9 Emission

3.0 Depth

3.0 Interval Time

- تیپ با 25 نیدل:
- Scar, acne scar & scar after surgery
- تیپ با 14 نیدل:
- Striae and Stretched mark Reduction